



I situationer där risken för spridning av infektioner är hög rekommenderas användning av personliga förflyttningsprodukter för patienter. Produkterna kasseras direkt efter användning och är ett stöd för vårdgivaren vid användning av infektionskontrollarbete. Engångsselen förbättrar hygien och minskar mängden arbete kring riskhanteringen av tvätt.

General Purpose Sling, patientspecifik

Sele för generell användning, som namnet hänvisar till, kan användas för de flesta patienter i alla slags situationer. Det går även att lyfta från golvet, tack vare det integrerade huvudstödet. Formen och utformningen av lyftselen tillåter personen att befinna sig i halvliggande läge, vilket gör att en person med andningsproblem kan placeras i en avlastande, lätt lutad vinkel med bra stöd för ryggstödet och huvudet. Våra selar kommer alltid individuellt förpackade för att förbättra hygien i hälso- och sjukvårdssituationen ännu mer. Dessa selar är gjorda av ett engångsmaterial till ett överkomligt pris. Den kan kasseras efter användning, vilket är ett välbehövligt stöd för vårdgivaren. Selen finns med antingen förstärkta öglor eller med clips för att passa alla lyftar på marknaden.

Positioning Sling, patientspecifik

Human Cares positioneringssele är utformad för att hjälpa en vårdgivare att säkert utföra vändning, positionering och lyft av en patient i ryggsläge. Den här produkten erbjuder bättre hygienkontroll genom att den kasseras efter användning. Något som gör den perfekt för kritiska vårdssituationer och intensivvård. Förstärkta remmar säkerställer säker och enkel användning för plötsliga omplaceringskrav. Alla lyftremmar är placerade för att säkerställa optimal komfort och säkerhet för patienten. Tillverkad av en slitstark blandning av polyester och bomull. Kan användas av patienten för flera lyft före kassering.

Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbanden och förändra lyftposition. Finns i flera längder.



Benstöd

Mjuka vadderade benstöd. Idealisk för användare med känslig hud eller smärta. Syntetiskt fårskinn.



Bygelpolstering

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygel.



Förflyttningslakan

Tillåter att vårdgivaren kan förflytta en patient i sidled, utan att lyfta. Det kan användas för att vända en patient eller flytta en patient i en säng.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositioneringar till och från samt i en säng.



Till och från rullstolen

Suitable for transfers and repositioning to and from a chair.



Till och från golvet


Passar för förflyttningar från golvet.



Engångsprodukt


Selenär avsedd för användning av en enda patient. Kassera efter användning.

Skötsel och funktioner

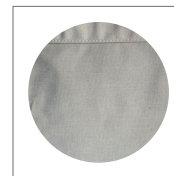

Bomullsmaterial

Engångsmaterial i bomull. Art. nr: NSB-451-U.

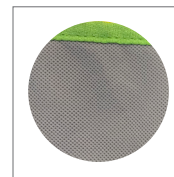

Polyestermaterial

Engångsmaterial i non-woven polyester. Art. nr: NSB-104C och NSB-105.



Förstärkta remmar

Färgkodade förstärkta remmar för enkel bestämning av nödvändig positionering.




Tvätt

Denna produkt ska kasseras efter användning. Tid sparas, eftersom den inte behöver tvättas.

Tekniska specifikationer

Art. nr	Storlek	Färg	A	B	C
NSB-104C-S	Small	S	30cm	84cm	78cm
NSB-104C-M	Medium	M	43cm	88cm	97cm
NSB-104C-L	Large	L	53cm	103cm	114cm
NSB-104C-XL	Extra Large	XL	68cm	114cm	133cm
NSB-105-S	Small	S	30cm	84cm	78cm
NSB-105-M	Medium	M	43cm	88cm	97cm
NSB-105-L	Large	L	53cm	103cm	114cm
NSB-105-XL	Extra Large	XL	68cm	114cm	133cm
NSB-451-U	One size		Bredd: 104cm	8 remmar	Höjd: 170cm
Max användarvikt:	318kg				

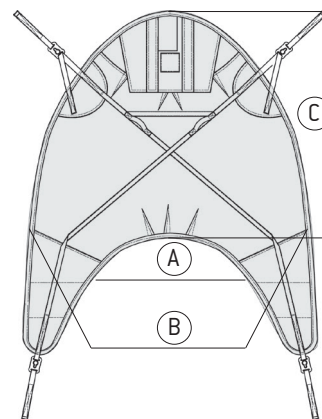

99059-Product sheet-Disposable-Slings-Rev01-ENG, (2020-04)

Utvecklad och tillverkad i enlighet med alla relevanta standarder: IEC 60601-2, ISO 10535.



Vi är Human Care

Human Care har ett brett sortiment av förflyttningsprodukter, som taklyftar, golvlyftar och lyftselar. Du är välkommen att besöka vår hemsida, www.humancaregroup.com – för att hitta inspiration och lösningar. Mejla oss gärna: info.se@humancaregroup.com.

We improve freedom of movement and quality of care for people.

Mer om produkten:

